

주의

- 자세한 설정 및 작동 정보에 대해서는 치료 장치의 설명서를 참조하십시오.
- 임상의가 치료 장치와의 호환성 여부를 확인할 수 있도록 마스크의 기술 사양이 제시되어 있습니다. 규격 외 사용시 마스크의 밀착성과 안락성이 효과적이지 않거나, 최적의 치료를 달성하지 못하거나, 누출 또는 누출율의 변화가 장치 기능에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 먼지와 피부의 유분 오염물이 마스크에 쌓이는 것을 방지하기 위해 이틀에 한 번씩 마스크를 세척해야 합니다.
- 승인되지 않은 세척 방법이나 소독 방법으로 마스크를 세척해서는 안 됩니다.
- 사용자는 마스크를 착용하기 전에 얼굴을 씻어야 합니다.
- 환자는 마스크의 디자인을 변경해서는 안 됩니다.
- 마스크를 의류 건조기에 넣지 마십시오.

사용 금지 사유

- 없음

기술 사양

1. 치료압 범위: 4~20cmH₂O
2. 22mm의 회전 고리로 연결
3. 저항(압력 강하)
 - @ 50 lpm = 0.6 cmH₂O
 - @ 100 lpm = 0.9 cmH₂O
4. 고정 누출율(제조상의 변화에 따라 유량은 달라질 수 있음):

압력 (cmH ₂ O)	4	5	10	15	20
유량 (lpm)	12.9	14.7	24.9	33.9	40.0

5. 환경적인 보관 및 작동 조건은 이 장치의 기능에 영향을 미치지 않을 것으로 예상됩니다.
6. 음향 레벨
 - A가중치의 음력 레벨, 26 dBA
 - A가중치의 음압 레벨 @ 1m, 18 dBA
7. 이 장치는 최소 90일 이상의 기간 동안 정상적인 사용 및 세척 조건 하에서 사용하기에 적합할 것으로 예상됩니다.
8. 이 장치는 천연 고무 라텍스로 만들어지지 않았습니다.

제한 보증 www.circadiance.com/help



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20,
2514 AP The Hague,
The Netherlands



Circadiance 제품에 해당되는 특허 및 상표에 대해서는 www.circadiance.com/IP를 참조하십시오.

100404 REV 4



SleepWeaver
Soft Cloth Masks

Advance

사용 지침


한국어

용도

이 SleepWeaver Mask는 지속기도양압(CPAP) 또는 2단계 치료에 필요한 경계면을 제공하기 위해 만들어졌습니다. 이 마스크는 한 명의 환자가 가정에서 재사용하거나 다수의 환자가 가정/시설 환경에서 여러 번 사용할 수 있도록 만들어졌습니다. 이 마스크는 체중이 30kg 이상인 환자에게 사용됩니다.



마스크 착용

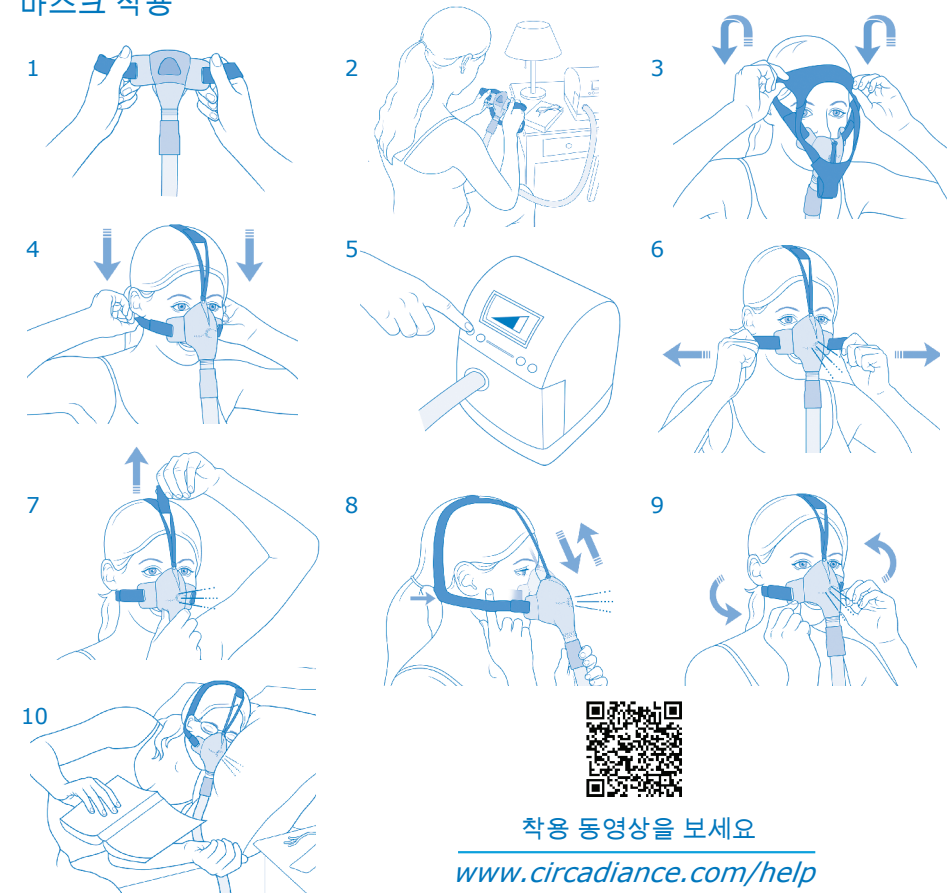

착용 동영상을 보세요

www.circadiance.com/help



우편 주소: PO Box 17480, Pittsburgh PA 15235
실제 주소: 1300 Rodi Road Turtle Creek PA 15145
전화: 888-825-9640 or +1 724-858-2837
cservice@circadiance.com www.sleepweaver.com

마스크 착용하기(계속)

1. 마스크의 포장재를 벗깁니다. 헤드기어에서 마스크를 제거한 경우, 마스크 날개 부분의 구멍을 통해 헤드기어 스트랩을 다시 부착합니다(그림 1). 기계의 튜브를 마스크 앞면의 플라스틱 호스 커넥터에 연결합니다.
2. 마스크의 컵 부분이 코 중앙에 오고 헤드 스트랩이 이마 중앙에 올 수 있도록 헤드기어를 머리 위로 당겨서 마스크를 착용합니다(그림 2 및 3).
3. 넥 스트랩이 귀 밑에 올 때까지 헤드기어를 머리 뒤로 당깁니다(그림 4).
4. 기계 전원을 켭니다(그림 5).
5. 마스크 아랫부분이 콧구멍 바로 아래 윗입술에 편안하게 고정될 수 있도록 먼저 넥 스트랩을 조절합니다(그림 6).
6. 헤드 스트랩을 조절하여 마스크를 코에 편안하게 고정되게 당깁니다(그림 7).
7. 헤드기어를 너무 조이지 않도록 주의하고, 헤드기어의 각 스트랩 아래 손가락 하나를 쉽게 넣을 수 있어야 합니다(그림 8).
8. 평소의 수면 자세로 누우며, 원단 부분이 피부에 밀착할 수 있도록 필요 시 마스크 위치를 옮깁니다(그림 9 및 10). 추가적인 조정 팁이 다음 섹션에 있으며, 자세한 착용 동영상은 www.circadiance.com/help에서 볼 수 있습니다.

누출 조정 - 누출이 발생할 경우에는 다음 단계를 시도해 보십시오.

1. CPAP 또는 이중 양압 장치를 켜고 처방 압력으로 설정한 상태에서 마스크를 코 바로 위에서 손으로 잡고, 마스크를 얼굴에서 발 쪽으로 약간 당긴 다음 부드럽게 푹니다.
2. 마스크 옆면에서 누출이 발생할 경우 목 끈의 탭을 풀고 끈을 밖으로 당겨 마스크를 조인 다음 탭을 끈에 다시 걸리게 하는 방식으로 목 끈을 조정합니다.
3. 누출되어 눈으로 들어갈 경우에는 머리 끈을 조정합니다.
4. 때로는 마스크를 약간 느슨하게 한 다음 1단계를 반복하는 방법으로 누출을 멈추게 하고 더 나은 착용감을 얻을 수 있습니다.
5. 머리 끈이 너무 조이거나 너무 느슨할 경우에 누출이 발생할 수 있습니다. 연습을 통해 자신에게 잘 맞는 꼭 맞고 편안한 착용감을 찾아야 합니다.

가정에서의 세척 지침 - 개인 사용

1. 이틀에 한 번씩 순한 비연마성 비누로 따뜻한 물에 마스크를 손세척합니다. 직사광선이 닿지 않는 곳에서 자연 건조시킵니다.
2. 헤드기어는 주 1회 손세척합니다.
3. 일정 기간 동안 사용 후에는 회전 이음쇠를 마스크에 부착하는 의료용 테이프가 접착력을 잃게 되어 교체해야 합니다.
4. 회전 이음쇠는 라텍스가 없는 흰색 의료용 테이프를 사용하여 마스크에 부착됩니다. 회전 이음쇠를 제거한 다음 식초와 물을 3분의 1로 섞은 용액(식초 1/3컵 및 물 1컵)에 담가 분리 세척할 수 있습니다.
5. 회전 이음쇠를 용액에 담근 후 충분히 헹군 다음 건조시킵니다.
6. 라텍스가 없는 의료용 테이프로 회전 이음쇠를 다시 부착합니다. (회전 이음쇠 절 참조)

여러 명의 환자 이용 시 세척 및 소독

www.circadiance.com/help 사이트를 참조하십시오.

마스크 제거

1. SleepWeaver를 벗으려면 마스크를 코에서 당긴 다음 헤드기어를 머리에서 들어 올립니다.
2. 헤드기어 끈을 느슨하게 할 필요는 없습니다. 연습을 통해 자신에게 맞게 핏을 조정된 후 착용하고 벗을 수 있습니다


회전 이음쇠 제거 - 만성 질환 상태가 있어서 의사나 호흡기 치료사가

특별히 지시하지 않는 한, 또는 마스크를 수면 실험실 환경에서 사용할 경우에는 마스크를 세척할 때마다 회전 이음쇠를 제거하여 테이프를 교체할 필요가 없습니다.

1. 마스크를 뒤집어 회전 이음쇠를 마스크에 부착하는 의료용 테이프가 보이게 한 다음 낡은 테이프를 제거합니다.
2. 세척을 위해 회전 이음쇠를 코 구멍을 통해 마스크 밖으로 밀어냅니다.
3. 위 세척 지침에 따라 마스크를 세척합니다.
4. 회전 이음쇠를 식초와 물을 1대 3의 비율로 혼합한 용액에 담가 분리 세척합니다. 담긴 후 잘 헹군 다음 건조시킵니다.

회전 이음쇠 재부착 - 라텍스가 없는 방수용 흰색 의료용 테이프 사용

1. 회전 이음쇠와 마스크가 모두 완전히 마른 후 마스크를 다시 뒤집습니다.
2. "수 부분"(길쭉하게 솟은 부분)이 천에서 1/2인치 정도 보이게 회전 이음쇠를 마스크 안 쪽에 놓습니다.
3. 라텍스가 없는 흰색 의료용 테이프를 약 10 1/2인치 길이로 자릅니다.
4. 한 손으로 회전 이음쇠를 마스크에 고정한 상태에서 길쭉하게 솟은 부분 옆에서 테이프를 부착하기 시작합니다. 테이프의 1/2이 천 위에, 1/2이 회전 이음쇠 위에 오도록 합니다.
5. 테이프로 회전 이음쇠와 마스크 둘레를 최소 세 번 감쌉니다.
6. 필요할 경우 낡은 테이프를 잘라낸 다음 손가락으로 주름을 펍니다.
7. 지침은 www.circadiance.com/help에서 온라인으로도 확인할 수 있습니다.

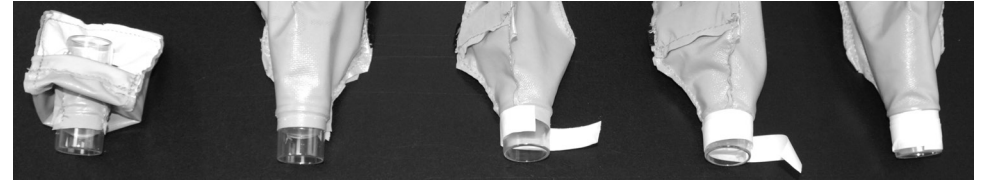

경고

- 이 장치는 통기 마스크이므로, 듀얼 림 인공호흡기 회로와 함께 사용해서는 안 됩니다.
- 이 마스크 또는 헤드기어의 어떤 부분에 대해 반작용이 있을 경우, 즉시 사용을 중단하십시오.
- 이 장치 장치는 전원을 켜서 올바르게 작동하는 경우가 아니면 사용해서는 안 됩니다.
- 통기구는 절대 막혀 있어서는 안 됩니다.
- 마스크를 올바르게 착용했는지 확인하십시오. 이 지침의 앞 페이지에 나온 대로 마스크와 헤드기어를 조립하고 위치시켰는지 확인하십시오.
- 시스템 구성품의 품질 저하가 눈에 확실하게 보일 경우(갈라짐, 부서진 부분, 찢어짐 등), 또는 세척 후에도 구성품이 더러운 경우 구성품을 폐기하고 교체해야 합니다.
- 이 지침에 설명된 것과 다르게 빈도, 방법, 또는 세척제를 바꾸어서 이 제품을 세척하면 마스크는 물론 결과적으로 치료의 안전성이나 품질에도 악영향을 미칠 수 있습니다.
- 마스크를 보충용 산소와 함께 사용할 경우 기계가 작동하지 않으면 산소 흐름을 꺼야 합니다. 산소가 누적되면 화재 위험이 있기 때문입니다.
- 마스크를 보충용 산소와 함께 사용할 경우 환자는 흡연을 삼가야 합니다.