

Påmindelser

- Se vejledningen til din behandlingsenhed for oplysninger om indstillinger og betjening.
- Maskens tekniske specifikationer er beregnet til din læge, der kan kontrollere, om de er kompatible med behandlingsenheden. Hvis brugen af masken går ud over specifikationerne, er maskens forsegling og komfort muligvis ikke effektiv. Der opnås ikke den bedst mulige behandling, og lækage eller variation i lækagehastigheden kan påvirke enhedens funktion.
- Masken skal rengøres hver anden dag for at undgå, at snavs og fedt fra huden ophobes på masken.
- Masken må ikke rengøres med rengørings- eller desinfektionsmetoder, der ikke er godkendt.
- Brugeren skal vaske sit ansigt, før masken bruges.
- Patienten må ikke ændre maskens design.
- Masken må ikke tørres i en tørretumbler.

Kontraindikationer

- Ingen

Tekniske specifikationer

1. Trykinterval ved behandling: 4-20 cm H₂O
2. 22 mm drejetilslutning
3. Modstand (trykfald)
@ 50 lpm = 0.4 cmH₂O
@ 100 lpm = 0.7 cmH₂O
4. Fast lækagehastighed (flow kan variere som følge af variation i fremstilling):

Tryk (cmH ₂ O)	4	5	10	15	20
Flow (lpm)	14	16	27	37	45

5. Opbevaringsomgivelser og driftsbetingelser forventes ikke at påvirke enhedens funktion.
6. Lydniveau
 - Lydeffektsniveau dB(A), 27 dBA
 - Lydtryksniveau dB(A) @ 1m, 19 dBA
7. Enheden forventes at kunne anvendes i en periode på mindst 90 dage ved normal brug og rengøring.
8. Enheden er fremstillet uden naturgummi/latex.

Begrænset garanti www.circadiance.com/help



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20,
2514 AP The Hague,
The Netherlands



0459

Besøg www.circadiance.com/IP for oplysninger om patenter og varemærker for produkter fra Circadiance

100680 REV 5



SleepWeaver
Soft Cloth Masks

Élan[®]

Brugsanvisning


Dansk

Tilsluttet anvendelse


Denne SleepWeaver maske er beregnet til brug ved CPAP- eller bi-niveaubehandling. Masken er beregnet til gentagen brug af en enkelt patient i hjemmet og af flere patienter i hospitaler/institutioner. Masken må bruges af patienter, der vejer over 30 kg.



Placering af masken

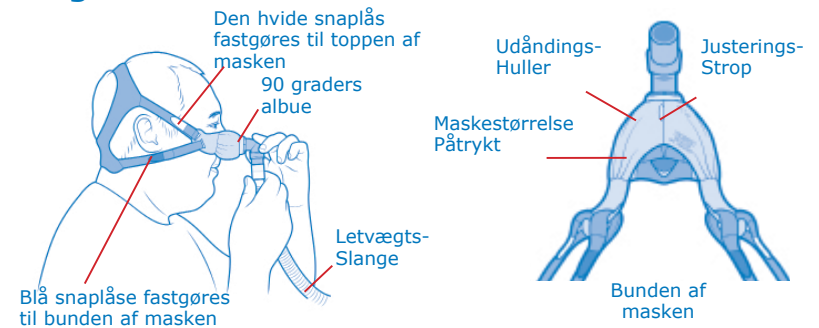

Tilpasning af masken

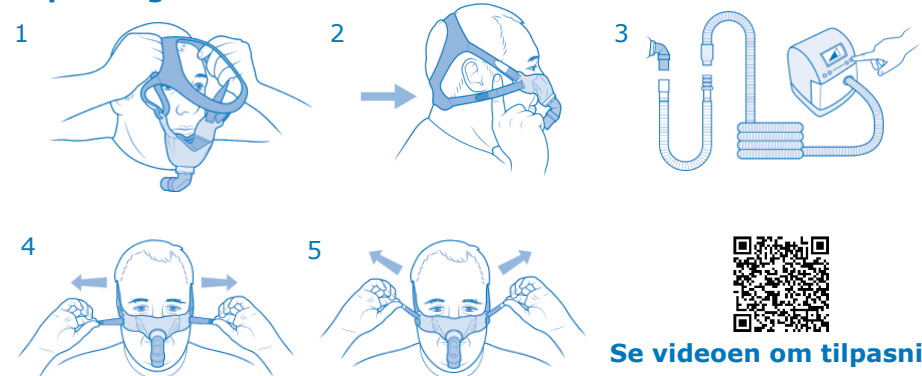

Se videoen om tilpasning

www.circadiance.com/help




Postadresse: PO Box 17480, Pittsburgh PA 15235
Bopælsadresse: 1300 Rodi Road Turtle Creek PA 15145
Telefon: 888-825-9640 or +1 724-858-2837
cservice@circadiance.com www.sleepweaver.com

Tilpasning af maske, fortsat

1. Tag masken på ved at trække hovedbåndet over hovedet.
2. Hovedbåndets nakkestøtte skal føles behageligt mod den nederste del af nakken. **VIGTIGT – STROPPERNE MÅ IKKE STRAMMES FOR MEGET. BEGYND MED LØSE STROPPER OG STRAM SÅ TIL EFTER BEHOV INDTIL DER DANNES EN LUFTTÆT FORSEGLING.**
3. Juster de nederste (blå snaplåse) stropper for at trække i masken til den føles behagelig mod næsen. Man vil kunne se en lille smule sort stof, når masken er i brug.
4. Juster de øverste (hvide snaplåse) stropper først, så bunden af masken hviler behageligt på overlæben lige under næseborene.
5. Fastgør letvægtsslangen til den 90 graders albue og derefter til den 1,8 meter lange slange, som fastgøres til CPAP eller bi-level maskinen og tænd for maskinen.
6. Læg dig i din normale sovestilling, og justér om nødvendigt masken, så stoffet danner en forsegling mod din hud. I følgende afsnit finder du flere tips til justering, og en oplysningsvideo om tilpasning kan ses på www.circadiance.com/help.

Justering ved lækage - Hvis der opstår lækage, kan du prøve følgende:

1. Stram stropperne forsigtigt en lille smule ad gangen for at danne en forsegling.
2. Flyt masken til venstre og højre og op og ned for at sætte den rigtigt på plads. Justeringsstroppen nederst på masken kan bruges til at gøre denne proces lettere.

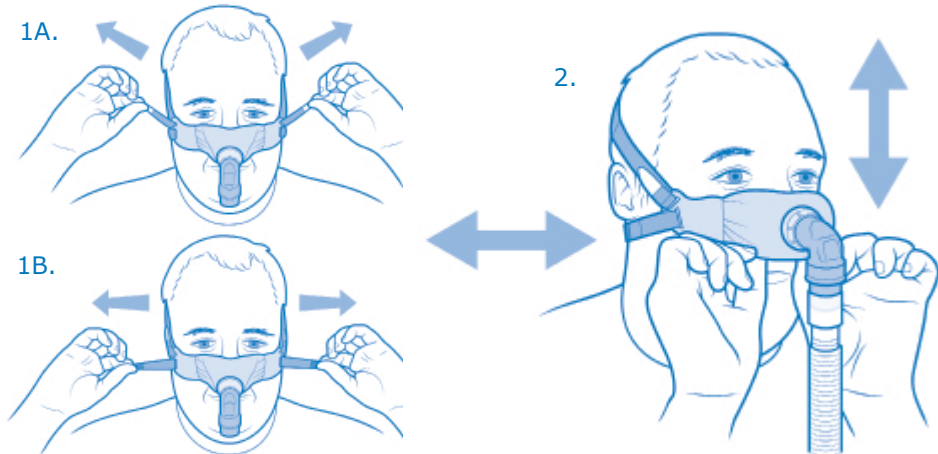

Rengøring af masken når du er hjemme

- Vask SleepWeaver Elan i hånden med en mild, ikke-slibende sæbe og varmt vand hver anden dag. Brug aldrig kogende vand. Vask indtil helt ren.
- Skyl godt med drikkevand og lad den lufttørre væk fra direkte sollys.
- Du kan lade den 90 graders albue være fastgjort under rengøringen eller du kan fjerne den og rengøre den separat.
- Håndvask hovedbåndet ugentligt.

Rengøring & desinficering mellem hver patient

- Besøg venligst www.circadiance.com/help for instrukser.

Fastgør masken til hovedbåndet

1. Før de "hvide" snaplåse gennem de øverste huller i puden.
2. Før de "blå" snaplåse gennem de nederste huller i puden.


Fastgør den 90 graders albue til maskepuden

1. Før stykket med "gevind" igennem åbningen fra indersiden af masken.
2. Anbring stykket med "spændeskive" overstykket med "gevind".
3. Sørg for at stoffet ikke skubbes op på stykket med gevind.
4. Skru stykket med "møtrik" på stykket med "gevind".



Fastgør spændestropen til hovedbåndet

1. Fastgør "spændestropen" til letvægtsslangen og til toppen af hovedbåndet for at hjælpe med at håndtere slangen, hvis den føres over hovedet.
2. Sørg for at "spændestropen" ikke er snoet når den er fastgjort.

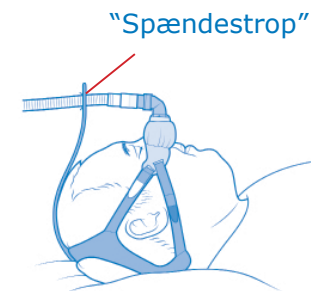

⚠ Advarsler

- Enheden er en maske med ventilation og må ikke bruges sammen med et ventilationskredsløb med to grene.
- Stop brugen øjeblikkeligt ved reaktioner over for dele af masken eller hovedtøjet.
- Systemet må ikke bruges, medmindre behandlingsmaskinen er tændt og fungerer korrekt.
- Ventilationshullerne må aldrig blokeres.
- Kontrollér, at masken er anbragt korrekt. Kontrollér, at maske og hovedtøj er monteret og anbragt som vist på forsiden af vejledningen.
- Hvis der registreres en tydelig svækkelse af en systemdel (revner, beskadigede dele, flænger osv.), eller hvis dele fortsat er snavsede efter rengøring, skal komponenten kasseres og udskiftes.
- Ændringer i rengøringshyppighed, -metode eller rengøringsmiddel til rengøring af produktet i forhold til beskrivelsen i vejledningen kan påvirke masken negativt og dermed sikkerheden eller kvaliteten af behandlingen.
- Hvis masken bruges med supplerende ilt, skal ilttilførslen slukkes, hvis maskinen ikke er i drift, da ophobning af ilt udgør en brandfare.
- Hvis masken bruges med supplerende ilt, må patienten ikke ryge.