

## Försiktighetsåtgärder

- Se handboken för din behandlingsenhet för information om inställningar och drift.
- Maskens tekniska specifikationer får din kliniker för att kunna kontrollera att den är kompatibel med behandlingsenheten. Om den inte används enligt specifikationerna kanske inte tätheten och effektiviteten hos masken är effektiv, optimal behandling kanske inte uppnås och läckor eller variationer i utströmningshastigheten kan påverka enhetens funktion.
- Masken ska rengöras varannan dag för att undvika att kontaminering av smuts och oljor från huden byggs upp på masken.
- Masken ska rengöras varannan dag för att undvika att kontaminering av smuts och oljor från huden byggs upp på masken.
- Användaren bör tvätta ansiktet innan denne sätter på sig masken.
- Patienten ska inte ändra maskens design.
- Placera inte masken i en torktumlare.

## Kontraindikationer

- Inga

## Tekniska Specifikationer

1. Behandlingstryckintervall: 4 till 20 cmH<sub>2</sub>O
2. 22 mm vridkoppling
3. Motstånd (tryckfall)
  - @ 50 lpm = 0.6 cmH<sub>2</sub>O
  - @ 100 lpm = 0.9 cmH<sub>2</sub>O
4. Fast utströmningshastighet (flödet kan variera beroende på tillverkningsvariation):

Tryck (cmH <sub>2</sub> O)	4	5	10	15	20
Flöde (lpm)	12.9	14.7	24.9	33.9	40.0

5. Miljöförhållanden för förvaring och användning förväntas inte påverka funktionen hos denna enhet.
6. Ljudnivå
  - A-vägd ljudeffektnivå, 26 dBA
  - A-vägd ljudtrycksnivå @ 1m, 18 dBA
7. Enheten förväntas vara lämplig för användning, under normalt bruk och vid normal rengöring, under en tidsperiod på minst 90 dagar.
8. Enheten är inte tillverkad med naturgummilatex.

**Begransad garanti** [www.circadiance.com/help](http://www.circadiance.com/help)



EMERGO EUROPE  
Prinsessegracht 20,  
2514 AP The Hague,  
The Netherlands



0459

För patent och varumärken som gäller Circadiance-produkter, gå till [www.circadiance.com/IP](http://www.circadiance.com/IP)

100388 REV 5



**SleepWeaver**  
Soft Cloth Masks

## Advance

### Användarinstruktioner


Svenska

### Avsedd användning

Denna SleepWeaver-mask är avsedd att ge en interaktion för kontinuerligt positivt luftvägstryck (Continuous Positive Airway Pressure - CPAP) eller tvånivåterapi. Masken är avsedd för upprepad användning av en enskild patient i hemmet och användning flera gånger av flera patienter i sjukhus-/institutionsmiljö. Denna mask ska användas av patienter som väger mer än 30 kg.



### Anpassa masken

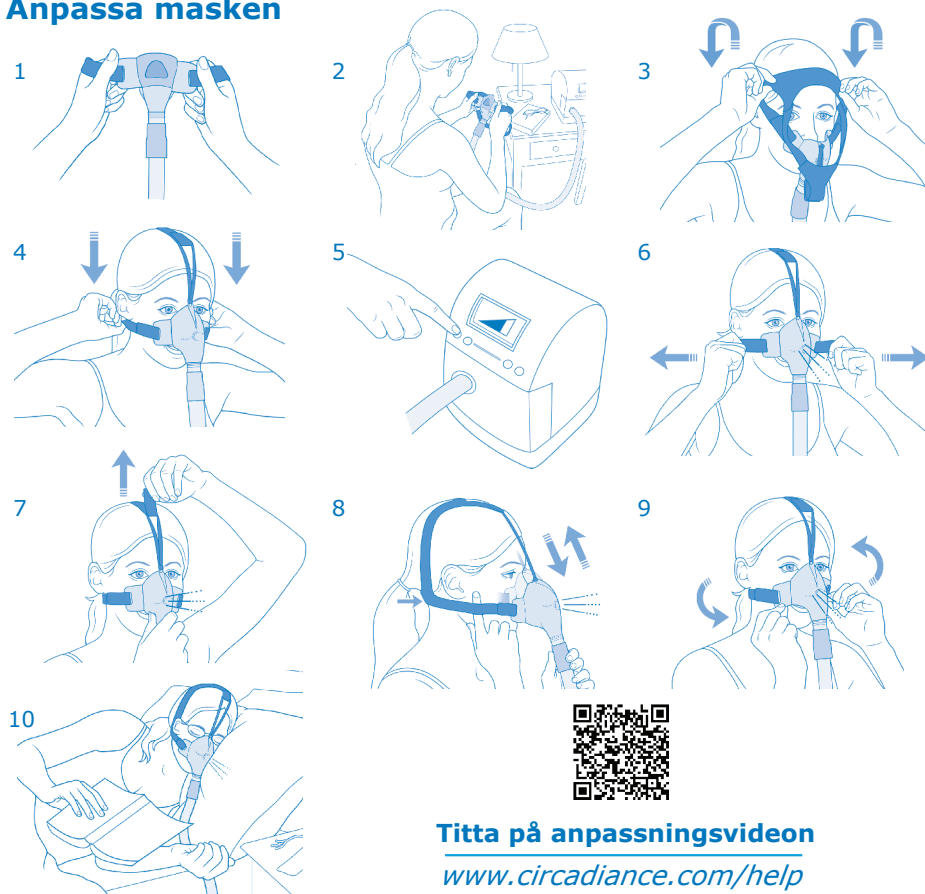

**Titta på anpassningsvideon**

[www.circadiance.com/help](http://www.circadiance.com/help)



Postadress: PO Box 17480, Pittsburgh PA 15235  
Fysisk adress: 1300 Rodi Road Turtle Creek PA 15145  
Telefon: 888-825-9640 or +1 724-858-2837  
[cservice@circadiance.com](mailto:cservice@circadiance.com) [www.sleepweaver.com](http://www.sleepweaver.com)

## Anpassa masken, fortsättning

1. Ta ut masken ur förpackningen. Om du har tagit loss masken från huvuddelen, sätt då tillbaka huvuddelens remmar i skårorna på maskens sidor (bild 1). Anslut röret från maskinen till plastslangskopplingen fram på masken.
2. Sätt på masken genom att dra huvuddelen över ditt huvud så att masken sitter centrerad över näsan och huvudremmen är centrerad i pannan (bild 2 och 3).
3. Dra huvuddelen över bakre delen av huvudet tills nackremmen ligger under dina öron (bild 4).
4. Starta maskinen (bild 5).
5. Justera först nackremmarna så att masken ligger bekvämt mot din överläpp, precis under närborrharna (bild 6).
6. Justera huvudremmen så att masken bekvämt trycks mot din näsa (bild 7).
7. Se till att huvuddelen inte är för hårt åtdragen. Du ska enkelt kunna dra ett finger under varje rem på huvuddelen (bild 8).
8. Lägg dig ner i normalt sovläge och flytta vid behov runt masken så att tyget skapar en försegling mot din hud (bild 9 och 10). Ytterligare justeringstips hittar du i följande avsnitt och en detaljerad anpassningsvideo finns att se på [www.circadiance.com/help](http://www.circadiance.com/help).

**Förslutningsåtgärder** - Om masken inte håller tätt, gå igenom följande steg:

1. Medan din CPAP- eller BiPAP-apparat är igång och inställd på ordinerat tryck, tryck fast masken över näsan, dra sedan ut masken från ansiktet, nedåt i riktning mot fötterna, och släpp tillbaka den försiktigt mot ansiktet.
2. Om masken inte håller tätt längs sidorna, justera nackremmen genom att lossa remmen från spännet, dra åt remmen för att justera passformen, och fäst sedan remmen i spännet igen.
3. Om masken inte håller tätt vid ögonen, justera huvudremmen.
4. I vissa fall kan du få en bättre och tätare passform genom att lossa något på masken och sedan upprepa steg 1.
5. Otäthet kan orsakas av att hättan antingen sitter för hårt eller för löst åt. Med lite övning bör du kunna hitta en passform som sitter åt ordentligt och samtidigt känns bekväm.

## Rengöringsinstruktioner för användning i hemmet - Individuellt bruk

1. Rengör masken för hand varje dag med ett mildt, ej repande medel i varmt vatten. Lufttorka utom räckhåll för direkt solljus.
2. Handtvätta huvuddelen varje vecka.
3. När du använt masken en längre tid kommer den medicinska tejp som håller fast anslutningstappen att lossna och måste då bytas ut.
4. Anslutningstappen är fäst vid masken med latexfri, vit medicinsk tejp. Du kan ta av anslutningstappen och rengöra den separat genom att lägga den i en vinägerlösning bestående av 1 del vinäger till 3 delar vatten (1 dl vinäger till 3 dl vatten).
5. Skölj tappen noggrant efter att den legat i blöt och låt den sedan torka.
6. Återfäst anslutningstappen med latexfri medicinsk tejp (se avsnitten angående anslutningstappen).

## Rengöring och desinficering mellan patienter

Besök [www.circadiance.com/help](http://www.circadiance.com/help) för instruktioner.

## Ta av masken


1. För att ta av SleepWeaver-masken, dra bort masken från näsan och lyft hättan över huvudet.
2. Du behöver inte lossa på hättans remmar. Med lite övning kommer du enkelt kunna ta av och på masken efter det att du har ställt in din passform.

**Ta av anslutningstappen** - *Det är inte nödvändigt att ta av anslutningstappen och byta ut tejp varje gång du tvättar masken, såvida du inte har en kronisk sjukdom och din läkare eller andningsterapeut uttryckligen sagt åt dig att göra det eller om masken används i ett sömnlaboratorium.*

1. Vänd masken ut och in så att du ser tejp som håller fast anslutningstappen i masken och ta bort den gamla tejp.
2. Tryck ut anslutningstappen genom nashålet i masken för rengöring.
3. Tvätta masken enligt rengöringsinstruktionerna ovan.
4. Rengör anslutningstappen separat genom att lägga den i en vinägerlösning bestående av 1 del vinäger till 3 delar vatten. Skölj tappen noggrant efter att den legat i blöt och låt den sedan torka.

**Återfäst anslutningstappen** - Använd latexfri, vattenfast, vit medicinsk tejp

1. När både anslutningstappen och masken är helt torra, vänd masken ut och in.
2. Placera anslutningstappen inuti masken och se till att den sticker ut ca 1,25 cm från tyget.
3. Klipp av en ca 27 cm lång bit vit, latexfri, medicinsk tejp.
4. Håll med ena handen fast anslutningstappen i masken medan du börjar tejpa vid kanten. Se till att ena halva av tejpbiten sitter på tyget och att den andra halvan sitter på anslutningstappen.
5. Snurra tejp runt tappen och masken minst tre varv.
6. Klipp av överflödigt tejp och släta ut eventuella veck med fingrarna.
7. Instruktioner finns även online på [www.circadiance.com/help](http://www.circadiance.com/help)

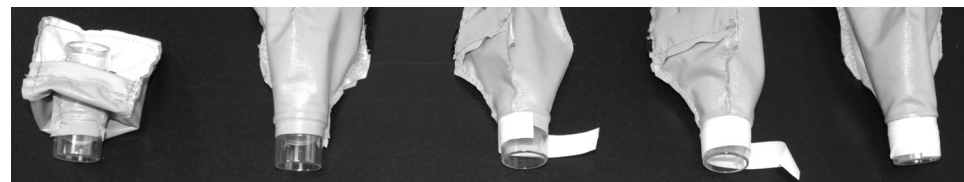

## ⚠ Varningsföreskrifter

- Enheten är en ventilerad mask och ska inte användas med en ventilationskrets med dubbla slangar.
- Om någon del av masken eller huvuddelen orsakar någon typ av reaktion, sluta omedelbart att använda den.
- Systemet ska inte användas om inte behandlingsenheten är påslagen och fungerar korrekt.
- Ventilationshålen får aldrig blockeras.
- Se till att masken har satts på korrekt. Se till att masken och huvuddelen sitter så som visas på framsidan i de här instruktionerna.
- Om någon komponent i systemet är synbart försämrad (sprickor, trasiga delar, revor, m.m.), eller om komponenterna inte blir rena trots rengöring, ska komponenten kasseras och bytas ut.
- Varierande frekvens, metod, eller om det rengöringsmedel som används för att rengöra produkten inte följer beskrivningarna i dessa instruktioner kan det ha negativ påverkan på masken och kan följaktligen påverka behandlingens säkerhet och kvalitet.
- Om masken används med extra syrgas ska flödet av syre stängas av om maskinen inte används eftersom ansamlat syre är en brandfara.
- Om masken används med extra syrgas ska patienten avstå från att röka.